


## Mesures de pH directement de votre ordinateur



pH Turtle de HANNA instruments®  
Le modèle HI 9815 est un convertisseur complexe, mais facile d'utilisation qui transforme tout ordinateur en pH-mètre. Il suffit de le brancher dans le port série de votre ordinateur et le tour est joué! En quelques instants, vous pouvez visualiser les mesures de pH sur l'écran de votre ordinateur.

Le logiciel HI 981500 convivial de HANNA instruments® permet un enregistrement de données continu en temps réel, à partir de l'ordinateur. Ce logiciel peut être exploité en huit langues : néerlandais, anglais, français, allemand, italien, norvégien, portugais et espagnol. La fenêtre principale de ce puissant logiciel renferme un affichage de pH-mètre virtuel, un tableau à mise à jour constante des données enregistrées et même un graphe en temps réel comportant une fonction de zoom évoluée.

La tortue de pH est aussi livrée avec une électrode à double jonction HI 1333B, une électrode de pH susceptible d'être rechargée pour assurer une longue durée de vie, même dans des échantillons variés et sales. De plus, son corps de plastique robuste assure une résistance élevée aux chocs et aux chutes accidentels.

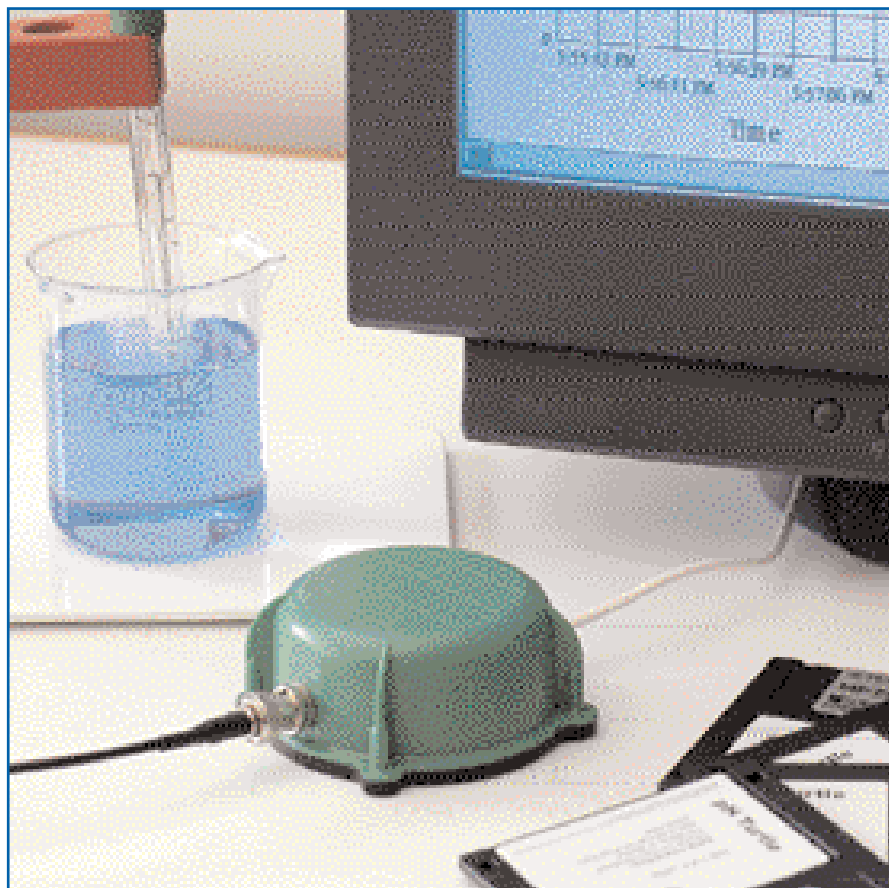

Compatible avec toutes les versions Windows®

### Caractéristiques techniques

	HI 9815
Gamme	0.0 à 14.0 pH
Résolution	0.1 pH
Précision (@20°C/68°F)	±0.2 pH
Étalonnage	automatique, à 1, 2 ou 3 points directement du clavier de l'ordinateur
Compensation de température	manuelle, 0 à 100°C (32 à 212°F)
Électrode pH	HI 1333B (incluse)
Impédance d'entrée	10 <sup>12</sup> ohms
Environnement	0 à 50°C (32 à 122°F); HR max 95%
Dimensions	Ø 88 x 40 mm (Ø 3.5 x 1.6")
Poids	250 g (8.8 oz)

### Accessoires

HI 1333B	Électrode de pH avec connecteur BNC et câble de 1 m (3.3')	HI 7010L	Solution tampon pH 10.01, 500 ml
HI 7000OP	Solution de rinçage pour électrodes, 25 x 20 ml	HI 77400P	Solution tampon pH 4 et pH 7, 5 x 20 ml chaque
HI 7004L	Solution tampon pH 4.01, 500 ml	HI 70300L	Solution d'entreposage pour électrodes, 500 ml
HI 7007L	Solution tampon pH 7.01, 500 ml	HI 7082	Solution électrolyte de remplissage 3.5M KCl, 4 x 30 ml
		HI 981500	Logiciel compatible Windows®

### Description du produit

HI 9815 (pH Turtle) est livré complet avec le logiciel HI 981500 compatible avec Windows®, un câble de connexion RS232 (11 m, 3,3'), une électrode de pH HI 1333B et un manuel d'instructions.

Pour la gamme complète de solutions d'étalonnage, de nettoyage et d'entretien, voir section F.  
Pour électrodes de pH et rédox, voir section E. Pour accessoires, voir section U.